



FDS76

DENTAL IMPLANTS



V4

PIATTAFORMA CONICA



V4 - CONNESSIONE CONICA

Introduzione: V4 è un impianto conico, leggermente aggressivo, adatto al carico immediato. E' caratterizzato da vite autofilettante con spostamento della piattaforma

Materiale: Ti-6AL-4VELI (Titanio grado 5)

Trattamento di superficie: SLA

Sterilizzazione: Raggi gamma

DESIGN CONICO CON MICRO ANELLI

- Supporto ottimale dei tessuti molli
- Volume massimo dell'osso alveolare
- Meno riassorbimento crestele

SPIRE APICALI AGGRESSIVE

Consente un osteointegrazione ossea più veloce, indicato per post estrattivi, scarsa qualità ossea e carico immediato

APICALE

- Ancoraggio ottimale

CONNESSIONE

- Connessione Conica 2,25mm-NP
- Connessione Conica 2.65mm-RP

SUPERFICIE IMPIANTARE

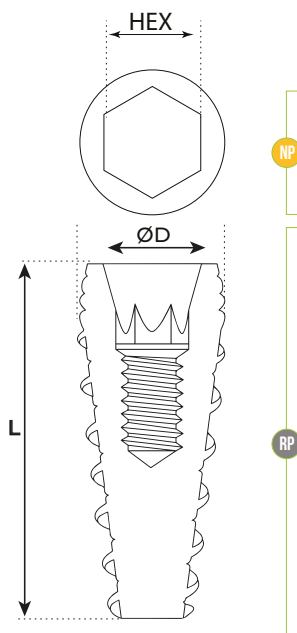
La micro superficie ottenuta dalla tecnologia SLA si traduce in un migliore ancoraggio meccanico per una migliore stabilità primaria ed è ottimale per l'adesione cellulare.

SISTEMA AUTOFILETTANTE

- Autofilettante
- Autoperforante


CONTENUTO BOX





ØD (mm)	HEX (mm)	L (mm)	CAT no.
3.5	2.25	8	NP0835
	2.25	10	NP1035
	2.25	11.5	NP1135
	2.25	13	NP1335
4.3	2.65	6	RP0643
	2.65	8	RP0843
	2.65	10	RP1043
	2.65	11.5	RP1143
	2.65	13	RP1343
5.0	2.65	6	RP0650
	2.65	8	RP0850
	2.65	10	RP1050
	2.65	11.5	RP1150
	2.65	13	RP1350

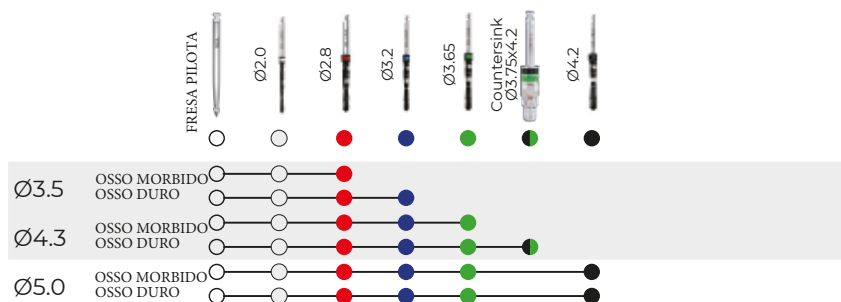PROTOCOLLO CHIRURGICO



		FRESA PILOTA	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Countersink Ø3.75x4.2	Ø4.2
Ø3.5	OSSE MORBIDO	○	○	●				
Ø3.5	OSSE DURO	○	○	●	●			
Ø4.3	OSSE MORBIDO	○	○	●	●	●		
Ø4.3	OSSE DURO	○	○	●	●	●	●	
Ø5.0	OSSE MORBIDO	○	○	●	●	●	●	●
Ø5.0	OSSE DURO	○	○	●	●	●	●	●

- Il protocollo chirurgico suggerito è solo una raccomandazione e non deve sostituire il parere del medico
- Gli impianti possono essere inseriti immediatamente quando è stata raggiunta una buona stabilità primaria (45 Ncm) e con un carico occlusale adeguato.

COMPONENTISTICA



VITI DI GUARIGIONE

PIATTAFORMA NARROW NP				
	2mm	3mm	4mm	5mm
	HCSNP2	HCSNP3	HCSNP4	HCSNP5
PIATTAFORMA REGULAR RP				
	2mm	3mm	4mm	5mm
	HCSR2	HCSR3	HCSR4	HCSR5

VITI PER MONCONI

PIATTAFORMA NARROW NP	PIATTAFORMA REGULAR RP
5.1mm	5.1mm
SWNP	SWRP

TRANSFER & ANALOGHI


PIATTAFORMA NARROW NP				
Open Tray -22mm	Closed Tray -14mm	Clip Transfer Short - 9mm	Clip Transfer Long - 15mm	Analog
STRONP	STRCNP	CTR9NP	CTR15NP	ANGNP
PIATTAFORMA REGULAR RP				
Open Tray -22mm	Closed Tray -14mm	Clip Transfer Short - 9mm	Clip Transfer Long - 15mm	Analog
STRORP	STRCRP	CTR9RP	CTR15RP	ANGRP

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Raccomandazione: stringere le viti di guarigione usando una coppia di 15 Ncm

MONCONI DRITTI

PIATTAFORMA NARROW NP

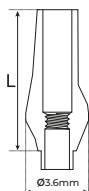MONCONI DRITTI NP



7mm

9mm

13mm




SANP7

SANP9

SANP13

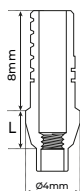MONCONI DRITTI CON SPALLA NP



1mm

2mm

3mm




SASNP1

SASNP2

SASNP3

PIATTAFORMA REGULAR RP

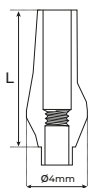MONCONI DRITTI RP



7mm

9mm

13mm




SARP7

SARP9

SARP13

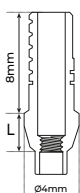MONCONI DRITTI CON SPALLA RP



1mm

2mm

3mm









SASRP1

SASRP2

SASRP3

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm

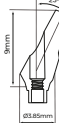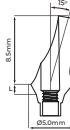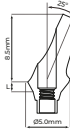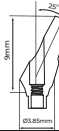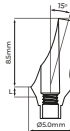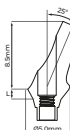MONCONI INCLINATI

PIATTAFORMA NARROW NP			
MONCONI 15° NP		MONCONI 25° NP	
			
	ATA15NP		ATA25NP
PIATTAFORMA NARROW NP			
MONCONI 15° CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	ATA1515NP	ATA1530NP	ATA1545NP
MONCONI 25° CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	ATA2515NP	ATA2530NP	ATA2545NP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
MONCONI 15° RP		MONCONI 25° RP	
			
	ATA15RP		ATA25RP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
MONCONI 15° CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	ATA1515RP	ATA1530RP	ATA1545RP
MONCONI 25° CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
			
	ATA2515RP	ATA2530RP	ATA2545RP

- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm

MONCONI PROVVISORI








PIATTAFORMA NARROW NP				PIATTAFORMA REGULAR RP			
Rotante NP		Non Rotante NP		Rotante RP		Non Rotante RP	
STANNP		STARNP		STANRP		STARRP	

MONCONI PROVVISORI IN PEEK

PIATTAFORMA NARROW NP			
MONCONI IN PEEK DRITTI CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
	PATI5NP	PATI3NP	PATI4NP
MONCONI IN PEEK 15° CON SPALLA NP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
	PATI51NP	PATI31NP	PATI41NP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
MONCONI IN PEEK DRITTI CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
	PATI5RP	PATI3RP	PATI4RP
MONCONI IN PEEK 15° CON SPALLA RP			
	1.5mm	3.0mm	4.5mm
	PATI51RP	PATI31RP	PATI41RP

- Confezionato con vite per moncone SWNP/SWRP
- PEEK (polietereeterchetone)
- Raccomandazione: serrare i Peek MONCONI con un torque di 20 Ncm

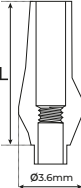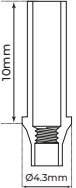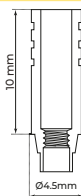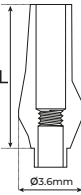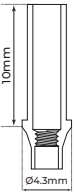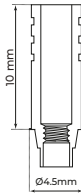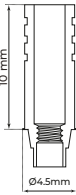CALCINABILI

PIATTAFORMA NARROW NP			
CALCINABILE ROTANTE NP		CALCINABILE NON ROTANTE NP	
 Ø3.6mm ROTANTE	 PCNNP	 10mm Ø4.3mm NON ROTANTE	 PCWNP
PIATTAFORMA NARROW NP			
CALCINABILE BASE IN CROMO COBALTO NP			
 10 mm Ø4.5mm ROTANTE	 CCBNP	 10 mm Ø4.5mm NON ROTANTE	 CCWNP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
CALCINABILE ROTANTE RP		CALCINABILE NON ROTANTE RP	
 L Ø3.6mm ROTANTE	 PCNRP	 10mm Ø4.3mm NON ROTANTE	 PCWRP
PIATTAFORMA REGULAR RP			
CALCINABILE BASE IN CROMO COBALTO RP			
 10 mm Ø4.5mm ROTANTE	 CCBNRP	 10 mm Ø4.5mm NON ROTANTE	 CCBWRP

- Base in cromo cobalto
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 25 Ncm
- Acetale (plastica calcinabile).
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 20 Ncm
- Confezionato con vite per moncone SWRP / SWNP



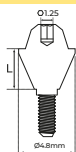
MULTI UNIT

PIATTAFORMA CONICA

MULTI UNIT

PIATTAFORMA NARROW NP

Multi Unit Dritti NP



1mm

2mm

3mm

4mm

5mm



MU1NP

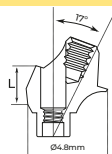
MU2NP

MU3NP

MU4NP

MU5NP

Multi Unit 17° NP



1mm

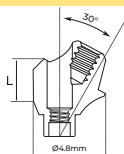
2mm



MU-17-1NP

MU-17-2NP

Multi Unit 30° NP



1mm

2mm



MU-30-1NP

MU-30-2NP



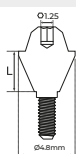
NM-S7101 NP



NM-X7101

PIATTAFORMA REGULAR RP

Multi Unit Dritti RP



1mm

2mm

3mm

4mm

5mm



MU1RP

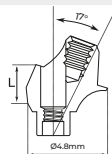
MU2RP

MU3RP

MU4RP

MU5RP

Multi Unit 17° RP



1mm

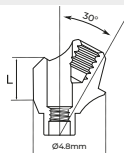
2mm



MU-17-1RP

MU-17-2RP

Multi Unit 30° RP



1mm

2mm



MU-30-1RP

MU-30-2RP



NM-S7101 RP



NM-X7101

• Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)

• Raccomandazione: serrare con una coppia di 30 Ncm

MULTI-UNIT ACCESSORI



TORRETTA IN TITANIO
VITE MU-SA INCLUSA

MU-TSL



Transfer PER Multi Unit

MU-TOT



TORRETTA CALCINABILE
VITE MU-SA INCLUSA

MU-PSL



VITE DI GUARIGIONE
PER Multi Unit

MU-HC



ANALOGO PER Multi
Unit

MU-ANG

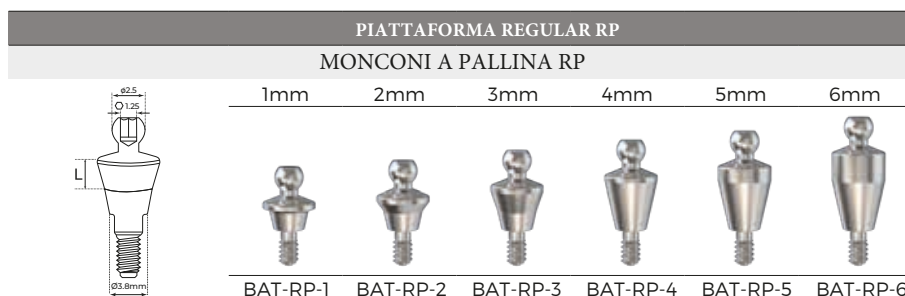


VITE PER MULTI UNIT

MU-SA

- Raccomandazione: serrare la vite MU-SA con una coppia di 20 Ncm

MONCONI A PALLINA





ACCESSORI PER MONCONI A PALLINA



- Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)
- Raccomandazione: serrare con una coppia di 30 Ncm

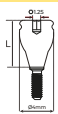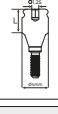LOCAT

PIATTAFORMA NARROW NP					
LOCAT NP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	LOC-NP-1	LOC-NP-2	LOC-NP-3	LOC-NP-4	LOC-NP-5
LOCAT NP INCLINATO 18°					
	1mm	2mm	3mm		
					
	LOC-NP-1810	LOC-NP-1820	LOC-NP-1830		
LOCAT NP INCLINATO 30°					
	1mm	2mm	3mm		
					
	LOC-NP-3010	LOC-NP-3020	LOC-NP-3030		
PIATTAFORMA REGULAR RP					
LOCAT RP					
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
					
	LOC-RP-1	LOC-RP-2	LOC-RP-3	LOC-RP-4	LOC-RP-5
LOCAT RP INCLINATO 18°					
	1mm	2mm	3mm		
					
	LOC-RP-1810	LOC-RP-1820	LOC-RP-1830		
LOCAT RP INCLINATO 30°					
	1mm	2mm	3mm		
					
	LOC-RP-3010	LOC-RP-3020	LOC-RP-3030		

ACCESSORI PER LOCAT

Cappetta metallo	Disco protettivo	Cappetta Rosa Soft 1.2 Kg	Cappetta Standard Trasparente 1.8 Kg	Cappetta Hard Viola 2.7 Kg	Analogo
					
MTCL	DP	SPCL	SWCL	STCL	AFL

• Titanio grado 5 (Ti-6AL-4V ELI)

• Tutti i LOCAT INCLINATI sono imballati con vite SWRP / SWNP

*Raccomandazione: serrare con una coppia di 30 Ncm



FDS76

DENTAL IMPLANTS



www.graphic-design.it

📍 Via Giosuè Carducci, 10 - 89018 - Villa San Giovanni (RC)

www.fds76.com



info@fds76.com



0965.921832



328.9171720